

EasyFlush®

Steuerbarer, gekühlter Mapping- und Ablationskatheter

EasyFlush ist ein temporärer, quadropolarer Katheter zur Ableitung intrakardialer Signale und gekühlten HF-Ablation tachykarder Herzrhythmusstörungen. Das in die Tip-Elektrode integrierte Thermoelement ermöglicht eine permanente, exakte Temperaturkontrolle. Die Oberfläche und das Material des Katheterschaftes tragen zur Reduzierung der Thrombenbildung bei. Der Katheter ist ruckfrei und stufenlos steuerbar und sehr



drehstabil und ermöglicht so eine ideale Positionierbarkeit. Die Auslenkung der Katheterspitze erfolgt proportional zur Bewegung des distalen Teils des Griffstücks. Die einmal erreichte Position bleibt stabil. Die Größe der Kurvenform hängt von der Länge der steuerbaren Katheterspitze ab. Der Katheter kann durch jeden geeigneten Führungskatheter eingeführt und positioniert werden.

Eigenschaften

- Quadropolarer Mapping- und Ablationskatheter
- Unidirektional steuerbar 0-235°
- Aktive, offene Kühlung über 12 Austrittsöffnungen in der Tip-Elektrode
- In Tip-Elektrode integrierter Temperatursensor
- Hochwertiger Griff für optimales Handling und ruckfreie, stufenlose Steuerung
- Verschiedene Kurven
- Luer-Kühlschlauchanschluss

Technische Daten

- Anzahl der Elektroden: 4
- Elektrodenabstand: 2/5/2 mm
- Elektrodenlänge: Ringe 2 mm, Tip 4 mm
- Elektrodenmaterial: Platin/Iridium
- Nutzbare Katheterlänge: 100 cm
- Katheter-Außendurchmesser: 7 F (2,33 mm)

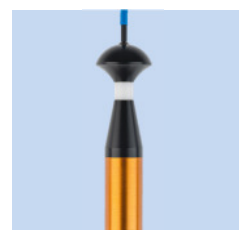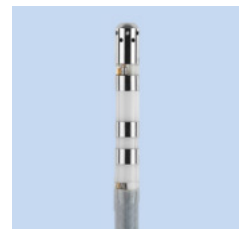

Bestellinformationen

EasyFlush®

Artikel	Farbcodierung	Länge steuerbare Spitze	Kurve (ca.)	Größe OD	Länge	Bestellnr.
EasyFlush P4M	 Grün	70 mm	D	7 F	100 cm	39 1052 26
EasyFlush P4L	 Blau	80 mm	F	7 F	100 cm	39 1052 44
EasyFlush P4XL	 Orange	90 mm	J	7 F	100 cm	39 1052 62

Empfohlene Mindestgröße der Einführschleuse: 8 F (2,67 mm)

Patientenkabel und Schlauchset (bitte separat bestellen)

Artikel	HF-Generator	Länge	Bestellnr.	Artikel	Pumpe	Länge	Bestellnr.
MagnoConnect E	EP-Shuttle	250 cm	39 1000 15	Schlauchset CF	CoolFlow	280 cm	39 1030 50
MagnoConnect I	IBI-1500T11	250 cm	39 1000 13				
MagnoConnect H	HAT 300	250 cm	39 1000 14				
MagnoConnect B	Bard CAG	250 cm	39 1003 23				
MagnoConnect A	ATAKR	250 cm	39 1000 16				

Bestellen Sie EasyFlush®

telefonisch: 0241-173518 | per Fax: 0241-175627 | per E-Mail: info@bispingmed.de

Weitere technische Details:

Anzahl der Elektroden 4 | Elektrodenabstand 2/5/2 mm | Elektrodenlänge 2 mm (Ring), 4 mm (Tip) |
 Elektrodenmaterial Platin/Iridium | Applizierbare Leistung, unipolare Applikation 75 Watt maximal |
 Temperatursensor Thermoelement in Katheterspitze | Betriebstemperatur 30-80 °C | Messgenauigkeit ± 2 °C |
 Spülanschluss Luer weiblich | Anschlussstecker 9-polige REDEL Kupplung, 60° codiert

Ein Produkt unseres Partners

