

# Defi Pads röntgentransparent

## Komplett röntgentransparente Defi-Elektroden für externe Defis

Komplett röntgentransparente Multifunktions-Elektroden für Defibrillation, Stimulation, Kardioversion und Monitoring. Ideal geeignet für den Einsatz im HKL, EP-Labor oder OP. Katheternavigation und Sondenplatzierung bei perfekter Sicht, ohne störenden Röntgenshatten der Defi Elektroden. Weniger Strahlenbelastung durch weniger strahlenabsorbierendes Material im Strahlengang. Die geringe Elektroden-


größe bietet viel freien Platz für weitere Elektroden (EKG, 3D-Navigation etc.). In verschiedenen Ausführungen und mit Anschlusskabel für alle gängigen externen Defibrillatoren verfügbar. Die Defi-Elektroden bieten eine niedrige Impedanz und einen niedrigen Stimulationsgrenzwert, bei sehr guter Verträglichkeit durch den Patienten.

### Vorteile

- Komplett röntgentransparent, dadurch bessere Sicht und weniger Strahlenbelastung
- Geringe Elektrodengröße, dadurch mehr Platz für weitere Elektroden
- Ideal für den Einsatz im HKL, EP-Labor oder OP

### Weitere Eigenschaften

- Für alle gängigen, externen Defis
- Modelle für Erwachsene oder Kinder
- Geeignet für Defibrillation, Stimulation, Kardioversion und Monitoring
- Sehr niedrige Impedanz und sehr niedriger Stimulationsgrenzwert
- Hervorragende Leitfähigkeit
- Sehr gute Haftwirkung
- Optimale Patientenverträglichkeit

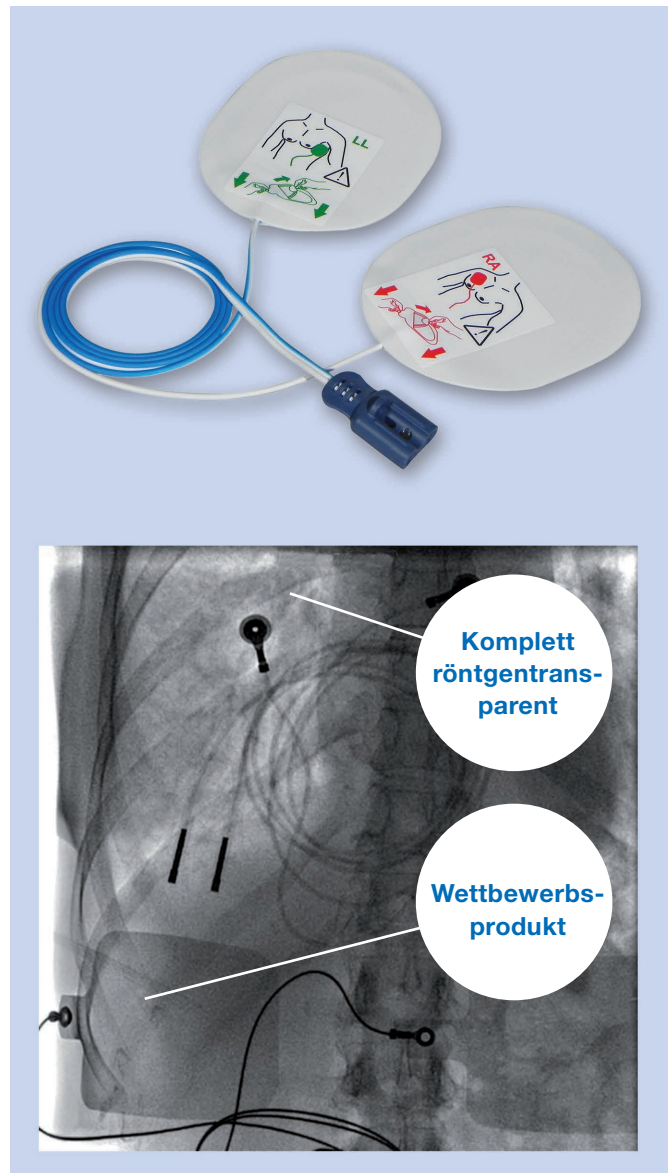

# Bestellinformationen (Auszug)

## Röntgentransparente Defi-Elektroden

Defi-Hersteller	Anschlussstecker	Ausführung	REF-Code	Bestellnr.
Philips		Defi Pad Erwachsene, komplett röntgentransparent	F7750	33 4010 00
Zoll		Defi Pad Erwachsene, komplett röntgentransparent	F7751	33 4011 00
Physio-Control Medtronic		Defi Pad Erwachsene, komplett röntgentransparent	F7752	33 4012 00
Nihon Kohden		Defi Pad Erwachsene, komplett röntgentransparent	F7755	33 4015 00
Nihon Kohden		Defi Pad Erwachsene, komplett röntgentransparent	F7761	33 4015 21
GE		Defi Pad Erwachsene, komplett röntgentransparent	F7762	33 4017 00
<b>Auch verfügbar:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Defi Pads für Defibrillatoren aller weiteren gängigen Hersteller</li> <li>■ Spezielle Defi Pads für Kinder</li> <li>■ Standard Defi Pads (röntgentransluzent)</li> <li>■ Sondervarianten, z.B. mit außenliegendem Anschlusskabel</li> </ul>				

# Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: 0241-173518 | Fax: 0241-175627 | E-Mail: [info@bispingmed.de](mailto:info@bispingmed.de)

### Technische Details

Erwachsene > 8 Jahre (> 25 kg); Kinder < 8 Jahre (< 25 kg) | Trägermaterial: Medizinischer Schaumstoff, Dicke: 1 mm | Leitendes Gel: Adhäsives Niedrig-Impedanz-Gel | Maße Erwachsene, je Elektrode: 148 cm<sup>2</sup> (gesamt), 95 cm<sup>2</sup> (leitend) | Maße Kinder, je Elektrode: 75 cm<sup>2</sup> (gesamt), 40 cm<sup>2</sup> (leitend) | Kabellänge: 100 cm | Max. Anzahl Defi-Entladungen: 50 bei 360 J (Kinder 50 bei 100 J)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.

Ein Produkt unseres Partners

